



## Prérequis

1

### Vérifier que les prérequis suivants soient respectés :

- Disposer du loader Windows pour VITAL'ACT-3S via le réseau de distribution
- S'assurer que votre VITAL'ACT-3S est :
  - ✓ Allumé
  - ✓ Connecté au poste de travail via l'USB
  - ✓ Équipé d'une carte SD (disponible auprès de votre revendeur)
  - ✓ Déchargé de ses FSE via le logiciel poste de travail
- S'assurer que l'ensemble des logiciels poste de travail (notamment les applications « santé ») soient arrêtés
- S'assurer qu'aucun antivirus ne bloque la procédure de mise à jour (se référer à votre prestataire informatique le cas échéant).

## Depuis votre poste de travail Windows

2

- ▲ Décompressez (ou « dézippez ») le dossier de mise à jour depuis le bureau.
- ▲ Cliquez droit sur le fichier **Sloader V3S v04.21.03.00 CRC=5788\_SLoader\_v4.0.0.1.exe**.

3

- ▶ Dans le menu, cliquez sur « **Exécuter en tant qu'administrateur** ».
- ▶ Le Sloader s'exécute.

### Ouvrir



Exécuter en tant qu'administrateur

Résoudre les problèmes de compatibilité

Épingler à l'écran de démarrage

4



- ▶ Cliquez sur « Démarrer »
- ▶ Le Sloader va mettre à jour votre **VITAL'ACT-3S**.

**Attention, ne pas débrancher le terminal tout au long de la procédure.**





5

- ▶ Le Sloder vous demande de confirmer la procédure
- ▶ Cliquez sur « **Oui** » pour continuer.
- ▶ Le Sloder vous demande de prendre connaissance et d'accepter le contrat de licence de l'application qui va être installée.
- ▶ Cliquez sur « **Accepter** » pour continuer.

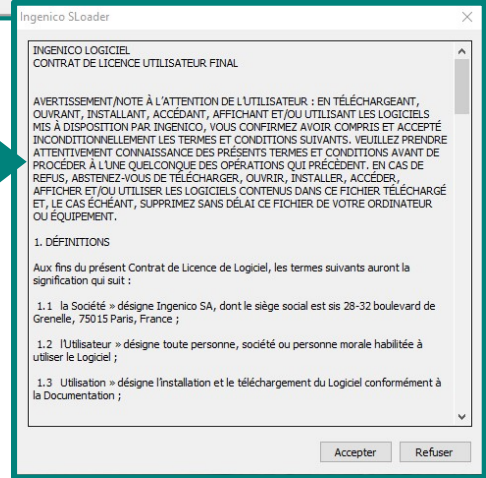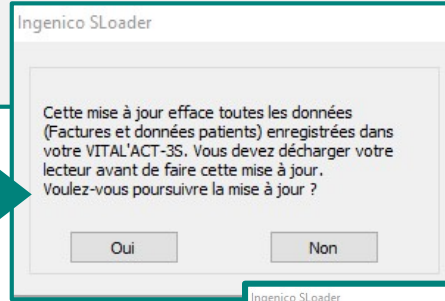

6

- ▶ Cliquez sur « **Démarrer** »
- ▶ Le Sloder vérifie si votre **VITAL'ACT-3S** répond aux prérequis de sécurité.
- ▶ Si le terminal ne répond pas dans les temps, **un message d'erreur s'affiche**. Dans ce cas, il est nécessaire d'exécuter de nouveau le Sloder et de reprendre la procédure comme décrit à partir du point **3**
- ▶ Si la configuration n'est pas valide, la procédure est stoppée et **ce message apparaît**.

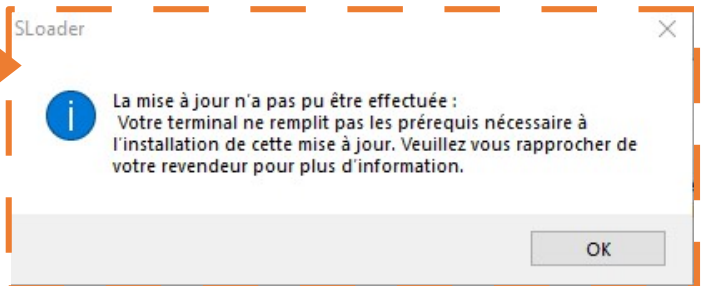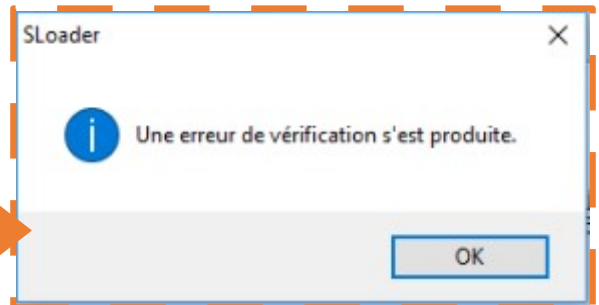




7


► Si le **VITAL'ACT-3S** répond aux prérequis de sécurité, le Sloder commence la mise à jour du **VITAL'ACT-3S**.

► Sur le **VITAL'ACT-3S** s'affiche « **INSTALLATION APPLI** »

**Attention, ne pas débrancher le terminal tout au long de la procédure.**

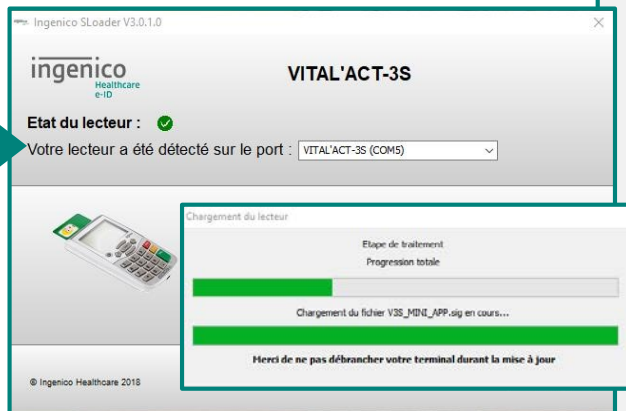

8

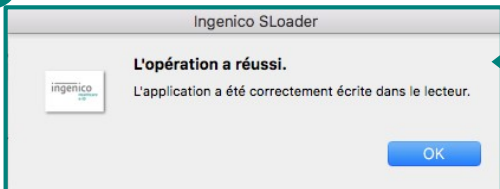

Pour finaliser l'opération, placez votre **carte de mise à jour** dans le lecteur (carte à insérer dans la fente utilisée pour la lecture des cartes Vitale).

◀ La fenêtre de dialogue vous informe que l'opération a réussi. Le **VITAL'ACT-3S** également.

◀ Fermez ensuite la fenêtre.

► L'écran du **VITAL'ACT-3S** est en « **ATTENTE ORDRE** ».

**Votre terminal est mis à jour !**



9 – optionnel

**Pour les prescripteurs uniquement:** la version **VITAL'ACT 3S 4.20** nécessite une base CCAM au format multigrille, version 50 minimum.

- Dans le dossier Sloder, double-cliquez sur le fichier « **ETAPE 2 - CCAMChargeur\_XX.XX.exe** »
- Effectuez les mêmes manipulations que celles décrites au point **3** et cliquez sur « Charger ». Le Sloder effectue la mise à jour : ne pas débrancher votre **VITAL'ACT-3S**.

**Votre terminal ainsi que la base CCAM sont mis à jour !**

